



Punta MAGLUMI®

USO PREVISTO

La punta es un accesorio para diagnóstico in vitro (IVD) diseñado para usarse con el analizador de inmunoensayo por quimioluminiscencia totalmente automático de la serie MAGLUMI y el sistema integrado de la serie Biolumi.

RESUMEN

La punta se utiliza para transferir muestras durante la prueba de ensayo MAGLUMI. La punta se colocará en el cajón de almacenamiento de puntas del sistema.

MATERIALES SUMINISTRADOS

ARBITRO	Descripción	Especificación
021717000101	Polipropileno	Puntas 20×192 (210)

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Para uso diagnóstico in vitro .

Solo para uso profesional.

No utilice el producto después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. No reutilice el producto.

La eliminación de todos los materiales de desecho debe cumplir con las directrices locales.

Nota: Si se produce algún incidente grave en relación con el dispositivo, infórmelo a Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd. (Snibe) o a nuestro representante autorizado y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido.

PROCEDIMIENTO

Materiales proporcionados

Consejo.

Materiales necesarios (pero no incluidos)

Analizador de inmunoensayo por quimioluminiscencia totalmente automático MAGLUMI X8, MAGLUMI X6, MAGLUMI X10 o sistema integrado Biolumi CX8.

Procedimiento de carga

Abra el cajón de almacenamiento de puntas.

Coloque las puntas en el lugar de almacenamiento siguiendo las instrucciones del manual de funcionamiento del analizador correspondiente.

Cierre el cajón de almacenamiento de puntas.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Sin abrir, conservar a 2-40°C hasta la fecha de caducidad indicada en las etiquetas.

Proteger de la luz solar directa.

Después de usar, vuelva a sellar la caja para proteger las puntas de la contaminación.

SÍMBOLOS Y EXPLICACIONES


	Consulte las instrucciones de uso.		Fabricante
	Límite de temperatura (Conservar entre 2 y 40 °C)		Mantener alejado de la luz solar.
	Número de catálogo		Fecha de caducidad

	Dispositivo médico de diagnóstico in vitro		Código de lote
	Representante autorizado en la Comunidad Europea		Componentes del kit
	Marcado CE		Por aquí arriba
	No reutilizar		identificador único del dispositivo
	Importador		Mantener seco

MAGLUMI® y Biolumi® son marcas comerciales de Snibe. Todos los demás nombres de productos y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.



Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd.
No.23, Jinxiu East Road, distrito de Pingshan, 518122 Shenzhen, PR China
Teléfono: +86-755-21536601 Fax: +86-755-28292740

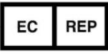

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburgo, Alemania
Teléfono: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726